

LA COULEUR À L'ETAT PUR

Esthetic Colorant
pour KATANA™ Zirconia



SPÉCIALEMENT CRÉÉ POUR KATANA™ Zirconia

Chaque dent possède sa propre structure de teinte interne. Grâce à ses matières premières et sa structure de couleur uniques, et spécialement développé pour la gamme multicouche KATANA™ Zirconia, Esthetic Colorant vous permet d'imiter facilement et efficacement ces différentes caractéristiques uniques.

Les liquides sont simplement appliqués sur la restauration monolithique ou anatomique après fraisage à l'aide d'un pinceau ou d'un stylo pinceau sans métal, de préférence avec un Liquid Brush Pen. L'Esthetic Colorant se diffuse dans la structure pré-frittée et se fixe pendant le frittage sans cuisson supplémentaire, pour des effets de teintes réalistes qui brillent depuis l'intérieur de la restauration.



Esthetic Colorant

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

DES RÉSULTATS RÉALISTES

1

Esthetic Colorant a été spécifiquement développé pour la gamme multicouche KATANA™ Zirconia afin de compléter les effets obtenus par la structure de couleur multicouche du matériau.

CONSERVATION DE LA RÉSISTANCE ORIGINALE DE KATANA™ Zirconia

2

Vous pensez peut-être que l'utilisation de liquides de coloration nuit à la résistance à la flexion de la sous-structure en zircone, mais Esthetic Colorant a été optimisé pour limiter toute perte de résistance.

UNE GAMME COMPACTE POUR UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE


3

Esthetic Colorant comprend seulement 12 teintes. Cela simplifie la gestion des stocks tout en garantissant l'obtention des effets typiques et des couleurs réalistes des dents naturelles avant même le frittage pour un rendu naturel et une harmonie parfaite.

PROCÉDURE EFFICACE POUR DES RÉSULTATS REALISTES



PRÉPARATION

Nettoyez la restauration KATANA™ Zirconia.

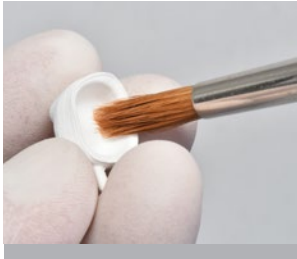


COLORATION

Appliquez les liquides Esthetic Colorant souhaités sur la restauration.

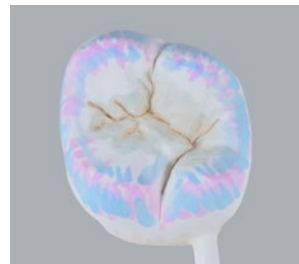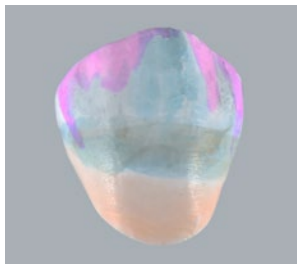



SÉCHAGE

Séchez à 80 - 200 °C / 176 - 392 °F pendant au moins 30 minutes
Utilisez un plateau en céramique pour éviter tout contact avec
du métal.

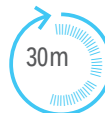



FRITTAGE

Frittez la restauration
conformément au programme
de frittage privilégié*.

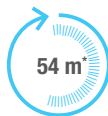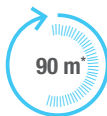

FINITION

Après le frittage, la restauration est finalisée par un polissage, un glaçage ou une stratification de la porcelaine.

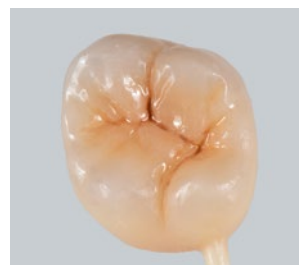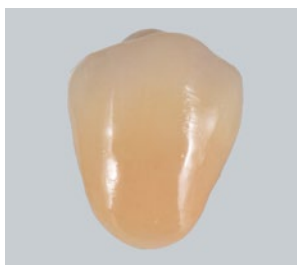

*Pour la gamme multicouche KATANA™ Zirconia, un programme de frittage de 54 minutes, 90 minutes et 7 heures est disponible.

ESTHETIC COLORANT EN ACTION

Après le fraisage



Coloration de finition



Après le frittage




Résultat final*




*Finalisation de la restauration par polissage, glaçage ou stratification de la porcelaine.
Photo : avec l'aimable autorisation du DT Shigeru Adachi, Cust Dental Supply Inc.

TABLEAU DE COMBINAISON DES TEINTES


DENTINE

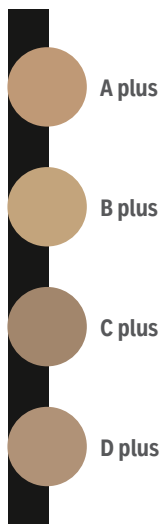

INCISAL

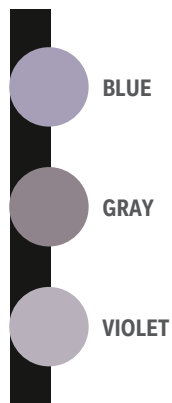


CERVICAL

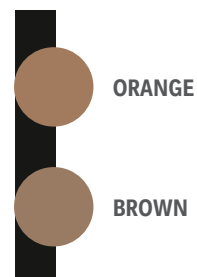

TISSUE



MODIFIER

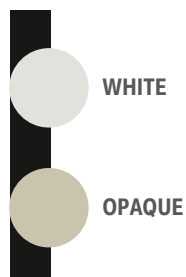

MASQUAGE DU PILIER

Les teintes WHITE et OPAQUE peuvent être utilisées pour masquer la couleur du pilier à l'intérieur d'une couronne. Brossez l'intérieur de la couronne avec White ou Opaque pour accroître l'opacité et contrôler la valeur.



Appliquez Esthetic Colorant Opaque




Après l'application




Après frittage de la restauration


Comparaison des restaurations avec/sans Esthetic Colorant OPAQUE

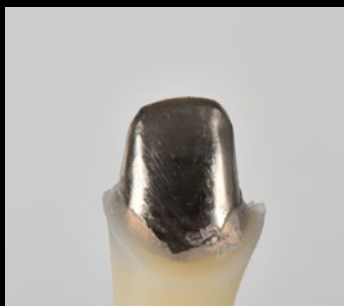

Pilier métallique

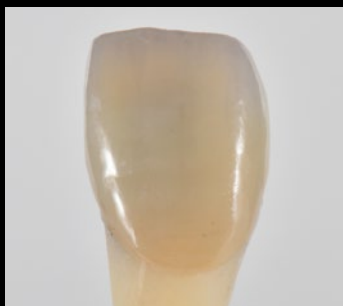

KATANA™ Zirconia YML A2
+ pilier métallique

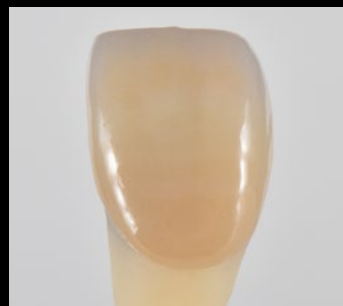

KATANA™ Zirconia YML A2
+ Esthetic Colorant OPAQUE
+ pilier métallique


UNE BASE SOLIDE

Gamme multicouche KATANA™ Zirconia

Vous recherchez un matériau de base du même fabricant ? Esthetic Colorant a été créé pour compléter la gamme multicouche KATANA™ Zirconia qui offre une base solide, esthétique et durable pour les restaurations.

La gamme est disponible avec une gradation de la couleur et une translucidité et une résistance à la flexion uniformes de différents niveaux (KATANA™ Zirconia UTML, STML et HTML PLUS) ou avec une gradation de la couleur, de la translucidité et de la résistance à la flexion (KATANA™ Zirconia YML).

			
UTML	STML	HTML PLUS	YML
Ultra-translucide Multicouche	Super translucide Multicouche	Hautement translucide Multicouche	Yttria Multicouche
Translucidité* 51 % Résistance* 557 MPa	Translucidité* 49 % Résistance* 748 MPa	Translucidité* 45 % Résistance* 1150 MPa	Translucidité* 45-49 %** Résistance* 750-1100 MPa**

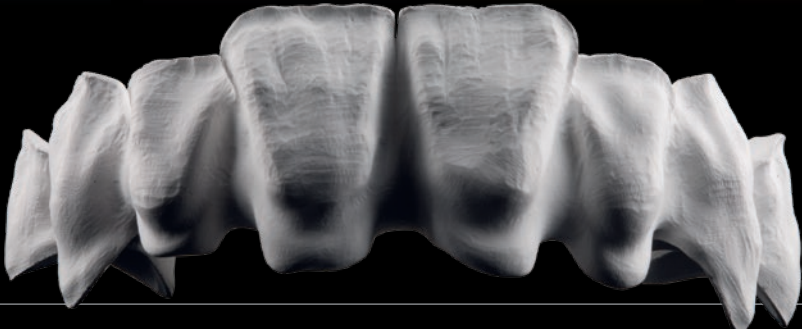

*Condition de mesure : Évalué par matériau de base (couleur blanche)


1 Selon la norme ISO 6872 : 2015, Taille de l'échantillon : 3 x 4 x 40 mm, 2 Transmission de toute la lumière, illuminant : D65, Épaisseur de l'échantillon : 1,0 mm **La translucidité et la résistance varient selon les couches.

Source des données : Kuraray Noritake Dental Inc.

PINCEAUX

Un stylo pinceau liquide (Liquid Brush Pen) dédié au Esthetic Colorant est désormais disponible.

Ce stylo permet d'exprimer en toute simplicité de nombreuses caractéristiques. Il offre un meilleur contrôle du liquide et réduit le risque d'une surapplication inattendue provoquée par un écoulement de liquide de son embout, etc.

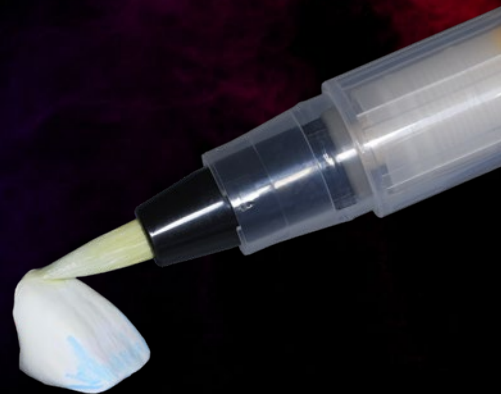

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain

La gamme de céramiques liquides CERABIEN™ ZR FC Paste Stain est appliquée en couches ultra-minces de l'ordre du micron. Ainsi, bien qu'étant un additif, la technique permet une conception monolithique sans aucun cut-back. Ce procédé est hautement efficace et contrôlable pour des résultats cohérents et prévisibles.

AVANTAGES

- ✓ Pâte de coloration externe facile à manipuler qui donne l'aspect attrayant de la caractérisation tout zircone
- ✓ Peut être cuite à 750 °C/1382 °F, moins que les températures conventionnelles pour les maquillants externes



GAMME DE PRODUITS



GAMME DE TEINTES ESTHETIC COLORANT 12 ml

127-0055EU Esthetic Colorant A plus
127-0065EU Esthetic Colorant B plus
127-0075EU Esthetic Colorant C plus

127-0085EU Esthetic Colorant D plus
127-0095EU Esthetic Colorant BROWN
127-0105EU Esthetic Colorant ORANGE



127-0115EU Esthetic Colorant GRAY
127-0125EU Esthetic Colorant BLUE
127-0135EU Esthetic Colorant VIOLET

127-0145EU Esthetic Colorant PINK
127-0155EU Esthetic Colorant WHITE
127-0165EU Esthetic Colorant OPAQUE

AUTRES PRODUITS ASSOCIÉS

127-0010EU Kit de base Esthetic Colorant
227-0019EU LIQUID BRUSH PEN

**POUR PLUS D'INFORMATIONS
OU POUR COMMANDER,
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC
LE RESPONSABLE RÉGIONAL
DE VOTRE SECTEUR !**



Emmanuel Bourdageau (région Nord)
07 88 69 35 17
emmanuel.bourdageau@kuraray.com

Dominique Terracol (région Rhône-Alpes Auvergne)
07 88 39 16 98
dominique.terracol@kuraray.com

Aurélien Dubrul (région Nord Ouest)
06 76 07 60 09
aurelien.dubrul@kuraray.com

Delphine Bibard (région Sud Ouest)
06 31 39 99 26
delphine.bibard@kuraray.com

Laura Yerle (région Ile de France)
06 83 95 66 11
laura.yerle@kuraray.com

Joelle Panter (région Nord-Est)
06 31 81 17 79
joelle.panter@kuraray.com

Christophe Commaux (région Sud Est)
06 80 59 25 53
christophe.commaux@kuraray.com

Votre contact

Kuraray France

63 Avenue du Général Leclerc,
92340 Bourg La Reine, France
Téléphone +33 (0)1 56 45 12 53
www.kuraraynoritake.eu/fr
dental-fr@kuraray.com



EU Importer

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone +49 (0)69 305 35 835
Fax +49 (0)69 305 98 35 835
www.kuraraynoritake.eu
centralmarketing@kuraray.com

Suivez-nous sur notre site web
ou le réseau social de votre choix



- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire le mode d'emploi fourni avec le produit.
- Les spécifications et l'apparence du produit sont sujettes à modification sans préavis.
- La couleur imprimée peut légèrement différer de la couleur réelle.

« PANAVIA™ », « CLEARFIL™ » et « CLEARFIL MAJESTY™ » sont des marques déposées de KURARAY Co., Ltd.. Dispositifs médicaux de Classe IIa. CE 1639. Organisme notifié : SGS Belgique



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com



09/2022