

MJK 
Instruments



CHIRURGIE BUCCO-MAXILLAIRE | PARODONTOLOGIE | IMPLANTOLOGIE

Spoon blades



TUNNELISATION

Applications

- Incisions intrasulculaires
- Tunnelisation
- Intervention par enveloppe
- Chirurgie de lambeaux déplacés apicalement ou latéralement
- Greffes double-papilles
- Desépithélialisation - **VIPER** SB004

AFFÛTAGE A.A.S.

(All Around Sharpened)

Les bistouris MJK Instruments bénéficient en exclusivité de l'affûtage A.A.S. (affûtage contourné et continu) qui permet d'inciser sans accroc en traction comme en poussée.

Associé à la forme unique des lames MJK Instruments, l'affûtage A.A.S., l'un des plus fins au monde, autorise des actes très ciblés, et dans la plupart des cas, en un seul trait d'incision.

Avantages :

- Confort du chirurgien
- Réduction des traumatismes
- Meilleure coaptation des tissus

Porte-lames



Applications

- Porte-lames inox (IH001 & IH002) ou alliage de titane (IH001T & IH002T)
- Diamètre de prise en main 6mm (IH001 & IH001T) ou 8mm (IH002 & IH002T)
- Longueur 11cm (IH001 & IH001T) ou 14cm (IH002 & IH002T)
- Molette de prise en main
- Molette de serrage sécurisée
- Conditionnement à l'unité
- Notice d'utilisation
- Non stérile



La série d'écarteurs **MJK Instruments 'Surgy Soft'** de formes et angulations spécifiquement étudiées, répond à toutes les situations d'intervention en chirurgie bucco-maxillaire, parodontale et implantaire.



Une chirurgie à livre ouvert

Applications:

Écarteur n°1 : S'adresse aux interventions dans les secteurs vestibulaires antérieurs.

Écarteurs n°2&3 : Sont plus indiqués pour les secteurs canines et prémolaires.

Écarteurs n°4&5 : Destinés plus précisément aux secteurs molaires, en vestibulaire, en lingual et en palatin, mais également dans les secteurs antérieurs, en lingual et en palatin.

De manière générale :

Les angles les plus fermés s'adressent aux zones les moins accessibles

Personnalisation :

L'adaptation par modelage du corps (à l'aide de la clé KE001) offre pour chaque instrument une infinité de possibilités d'accès à toute la cavité buccale.



KE001



'Surgy Soft' est la seule série d'écarteurs de chirurgie buccale entièrement personnalisable.

Pinces à greffons

LA TROISIÈME MAIN DU CHIRURGIEN

Applications


Conçues pour la chirurgie osseuse, les pinces à greffons assurent un maintien ferme et stable du greffon en position, et libèrent ainsi la main du chirurgien pour une intervention confortable et sécurisée (le forage peut se faire aisément et directement sur le site).

Crémaillère allongée pour une ouverture plus importante.

Mors asymétriques autorisant le libre accès pour les opérations de forage et de vissage.

Les extrémités «cuvillère» (côté palatin) et «boule» (côté greffon) finement moletées, assurent une accroche parfaite sur la surface osseuse.

Greffon osseux

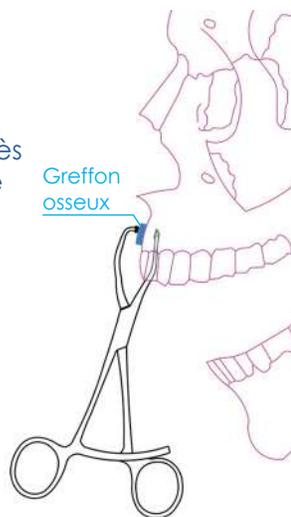

CL011
Mors droits



CL021
Mors asymétriques côté droit



CL022
Mors asymétriques côté gauche

Applicateur de greffons

SIMPLE, MAIS TRÈS EFFICACE

Applications

- L'applicateur de greffons MJK Instruments évite au chirurgien de tenir le greffon avec son doigt ou un autre instrument inadapté.
- La tête de l'instrument finement moletée, offre une accroche parfaite sur la surface osseuse et permet de maintenir le greffon en situation.
- Lors de l'intervention, l'instrument peut basculer à gauche ou à droite, tout en restant en contact permanent avec le greffon afin de le maintenir en pression.

Tête moletée



AP001

(modèle fantôme)



«Concevoir et commercialiser des instruments de Chirurgie innovants et adaptés, ingénieux et simples.»

C'est ainsi que les fondateurs de MJK Instruments ont décidé de définir leur activité.

Innovants... Pour nous différencier.

Adaptés... Pour répondre au mieux aux exigences de notre clientèle.

Ingénieux... Parce que c'est notre légitimité dans un marché dominé par des groupes aux moyens considérables.

Et simples... Parce que les idées les plus simples sont toujours les meilleures.

Avec, comme préoccupation permanente, l'exigence de la qualité et de l'excellence qui nous guide systématiquement dans la sélection de nos partenaires.



De sa conception à sa mise sur le marché, un produit MJK Instruments est toujours le fruit d'une étroite collaboration avec les chirurgiens les plus reconnus.

Notre volonté est de répondre aux exigences de nos utilisateurs, en offrant une gamme d'instruments ingénieux, et qui facilitent la pratique d'actes chirurgicaux sur des sites difficiles d'accès.

MJK Instruments s'est plus particulièrement positionnée sur la chirurgie dentaire et maxillo-faciale.

Les produits MJK Instruments font l'objet des démarches légales nécessaires à l'obtention du marquage CE.

Toutes les dispositions sont également prises en matière de traçabilité.

Installée depuis octobre 2007 sur le site du technopôle de Château Gombert, MJK Instruments a déménagé ses bureaux en Janvier 2015 afin de tripler sa surface de stockage et répondre ainsi à la demande croissante de sa clientèle.


La ville de Marseille, en plus de son climat exceptionnel, offre un environnement particulièrement propice à l'épanouissement de ses entreprises.

Et si elle est avant tout un choix du cœur, notre situation géographique résulte également d'une option stratégique.





VOTRE DISTRIBUTEUR



MJK Instruments

159, Chemin de Sainte Marthe
13014 Marseille
France

Tel. : +33 (0) 608 699 771

Fax : +33 (0) 491 537 260

contact@mjkinstruments.com - www.mjkinstruments.com

