

Des abrasifs professionnels pour satisfaire les pires exigences



Dura-Green® DIA

Le modelage et la finition des restaurations tout céramiques comme celles à base zirconie devient maintenant plus facile, plus rapide et plus sûr.

Composés de particules de diamant noyées dans un liant spécial, les **Dura-Green DIA** présentent des propriétés abrasives hors du commun et terriblement efficaces pour une large gamme d'applications.


Les abrasifs **Dura-Green DIA** vous permettent des ajustages sur tout type de céramique, y compris les détails anatomiques, même dans les zones marginales les plus sensibles et ce en utilisant une faible pression. On évite ainsi le risque d'écaillage ou de micro fissure.



Proven products for better dentistry

Dura-Green® DIA

EFFICACE, VERSATILE, DOUX POUR LE MATERIAU

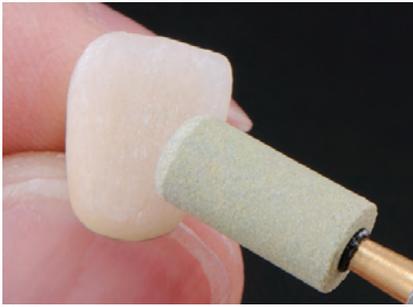

CY5: Modelage en surface

Très performant en coupe. Exelle pour obtenir la forme voulue lorsqu'on a besoin d'une réduction sensible de matériau.



KN7: Ajustage d'armature

Corrige en douceur les espaces interdentaires, les bords marginaux et les épaisseurs de paroi.



TC4: Finition en détail

Utilisé sous une forme modifiée ou tel que livré, il permet de travailler sur les détails de surface et sur l'ajustement occlusal.




Pour modifier la forme des Dura-Green DIA ou les nettoyer, les faire tourner au contact de l'Adjuster Shofu (oxyde d'aluminium).

Coup d'œil sur les avantages:

- Efficacité et douceur de travail sur le matériau grâce à l'abrasif complètement imprégné de diamant
- Risque minime de micro fissure
- Basse pression de contact
- Peu de vibration
- Effet calorique minime
- Très grande stabilité marginale


La microstructure diamantée des Dura-Green DIA leur assure une surface plus homogène et une durée de vie plus importante que les instruments au carbure de silicium:

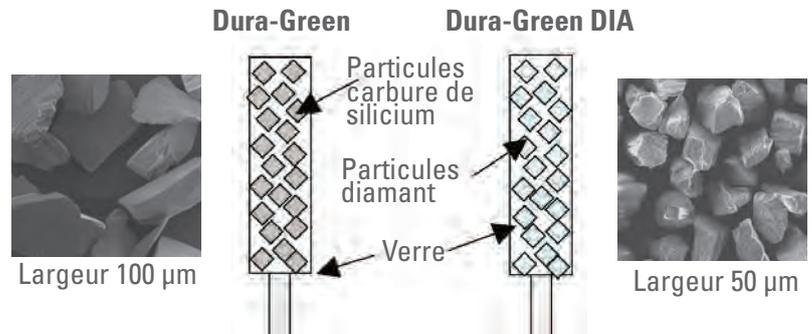

Le produit idéal à utiliser pour: restaurations tout zircono ou à base zircono, disilicate de lithium, oxyde d'aluminium, céramiques classiques & pressées, métaux

FORMES

Vitesse maximum:
30.000 t/min

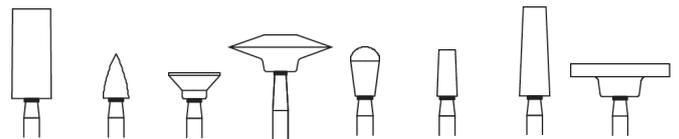

Forme	CY5	FL3	IC5	KN7	RD3	TC2	TC4	WH6
N° ISO	056	031	070	125	035	025	040	125
PM	0156	0158	0162	0154	0159	0161	0155	0157
CA		0163			0164	0165		

Emballé en boîte de 2: CY5, KN7, WH6 / boîte de 3: FL3, IC5, RD3, TC2, TC4

Référence	Désignation	Contenu
0153	Kit PM: CY5, KN7, TC4	1 pce. chaque
0166	Kit CA: FL3, RD3, TC2	1 pce. chaque
0504	Shofu Adjuster	1 pce.



SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17 · D-40878 Ratingen
Telefon 0 21 02/86 64-0 · Fax 0 21 02/86 64-65
E-mail: info@shofu.de · www.shofu.de